


Lansinoh®

Extractor Thrive 2-en-1



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Ensamble de copa manos libres

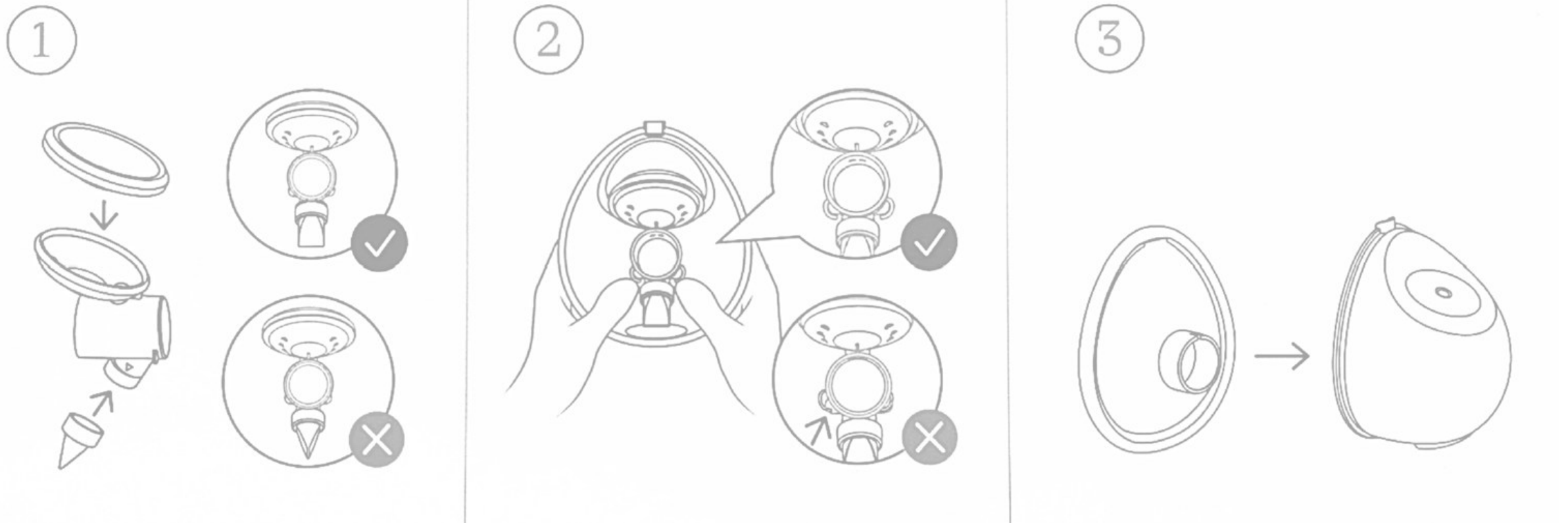



Acople el diafragma de silicona al cuerpo de la brida manos libres y presione para asegurar el sellado. Acople la válvula al cuerpo de la brida manos libres, asegurándose de que la orientación sea la correcta.

Coloque el diafragma de silicona y el cuerpo de la brida manos libres en la ranura circular de la copa de recolección, asegurándose de alinear las pestañas del cuerpo de la brida con las guías de la copa de recolección. Luego, presione firmemente para asegurar un sello hermético.

Acople la brida manos libres a la copa de recolección ensamblada y al cuerpo de la brida manos libres insertando el túnel del pezón en el cuerpo de la brida. Alinee los orificios de vertido en la parte superior de la copa de recolección y presione todo alrededor de la copa para asegurar un sello seguro.

IMPORTANTE!


Asegúrese de que las copas estén completamente conectadas con un sello hermético para evitar fugas de leche. No desmonte las copas manos libres hasta que haya vertido la leche.

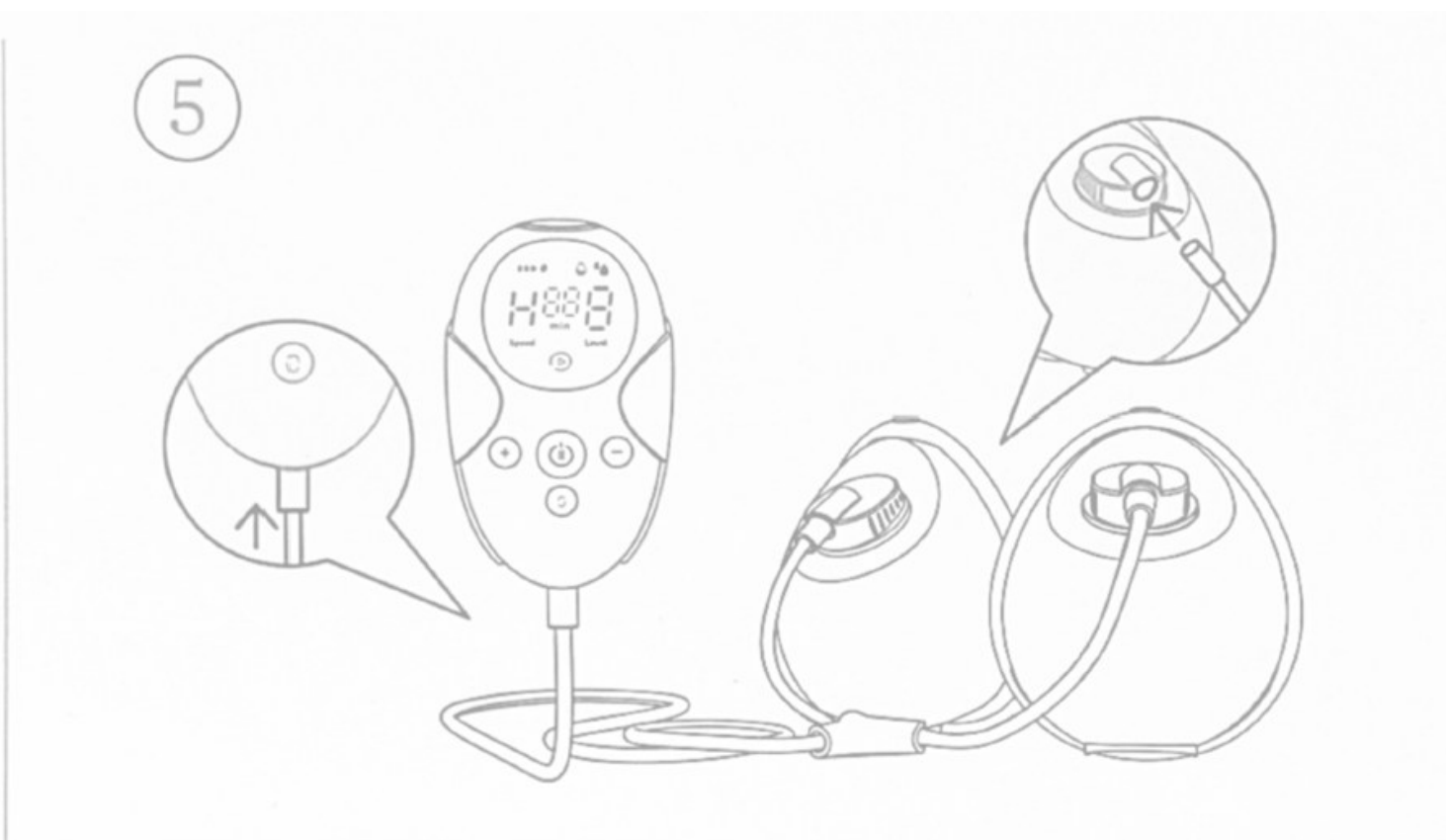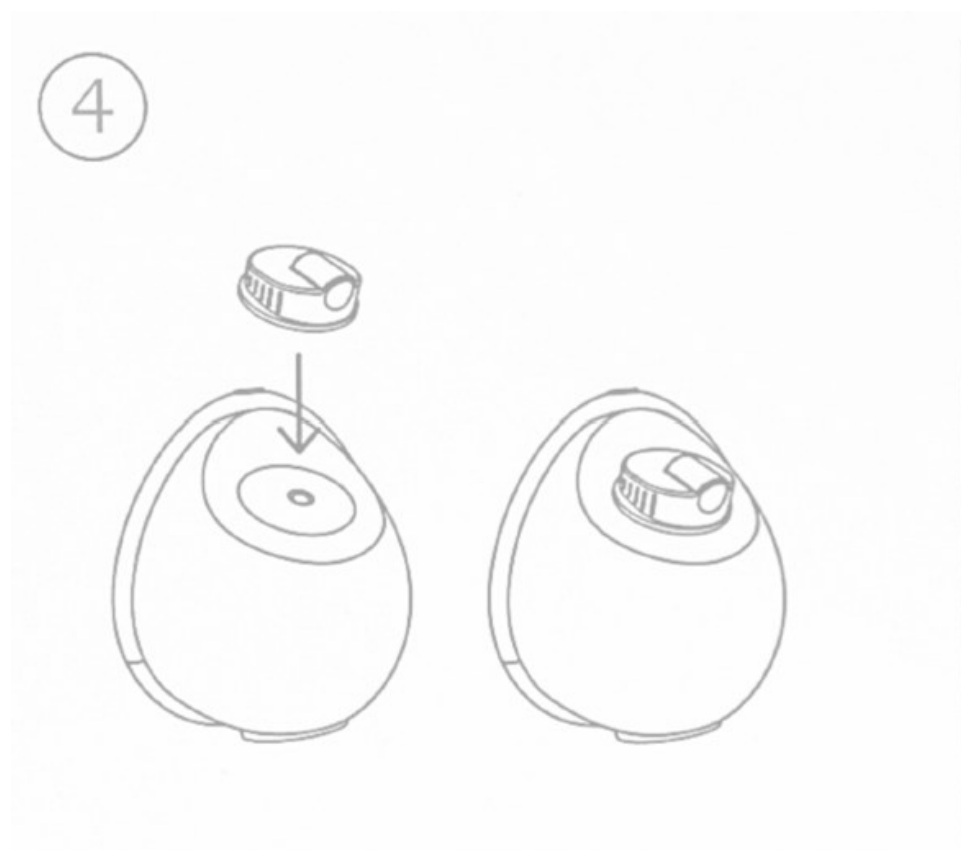

Acople la tapa de la copa de recolección a la copa de recolección ya ensamblada.

Conecte el extremo largo del tubo al puerto del tubo ubicado en la parte inferior de la unidad central del extractor. Conecte los otros extremos a los puertos de los tubos en las tapas de las copas de recolección.

Ensamble de la copa tradicional

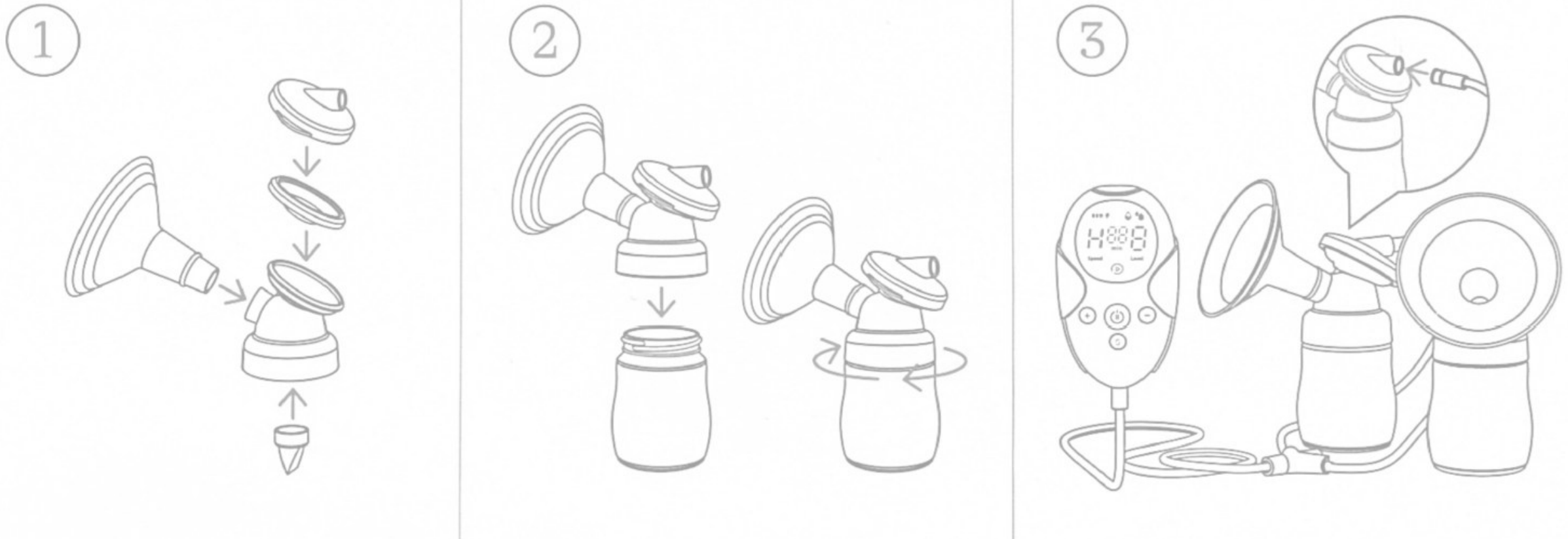


Acople el diafragma de silicona y la tapa del diafragma en el cuerpo de la brida con el puerto del tubo opuesto al cuello de la brida. Acople la válvula a la parte inferior del cuerpo de la brida. Inserte la brida en el cuerpo de la brida, asegurando un ajuste apretado.

Acople el ensamblaje del cuerpo de la brida al biberón y gire para sellar.


Inserte el extremo largo del tubo en el puerto ubicado en la parte inferior de la unidad central del extractor. Inserte los otros extremos del tubo en los puertos de los tubos de las tapas de los diafragmas.

Piezas del Extractor Thrive 2-en-1


Extractor

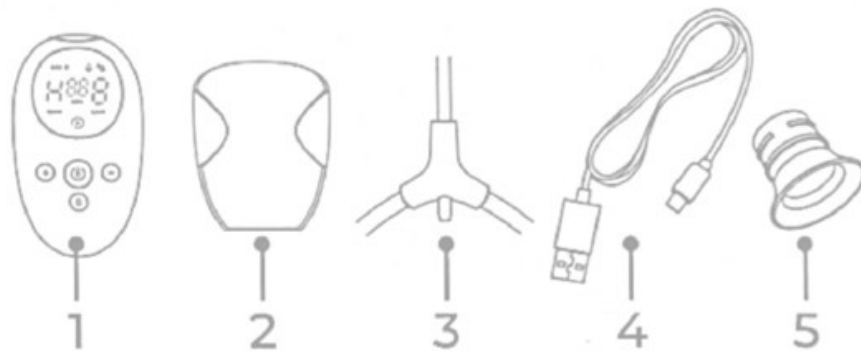

kit manos libres

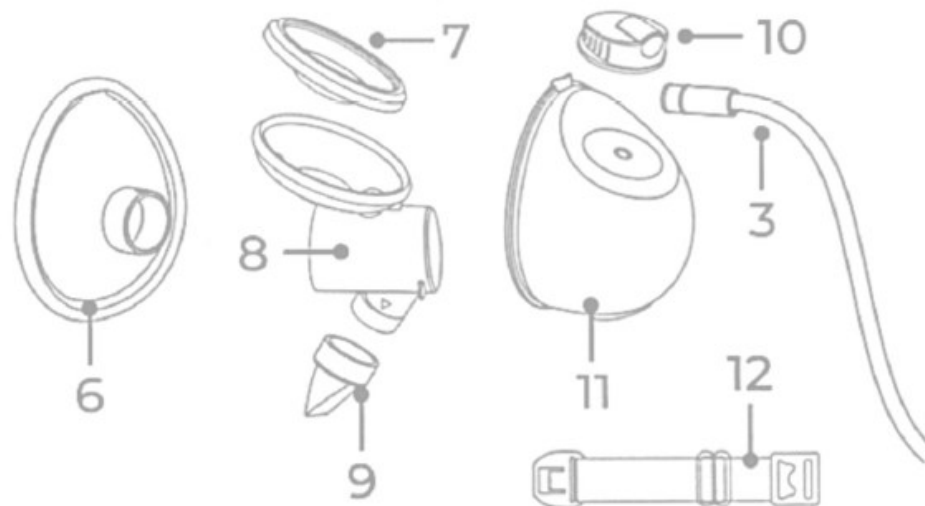

kit tradicional

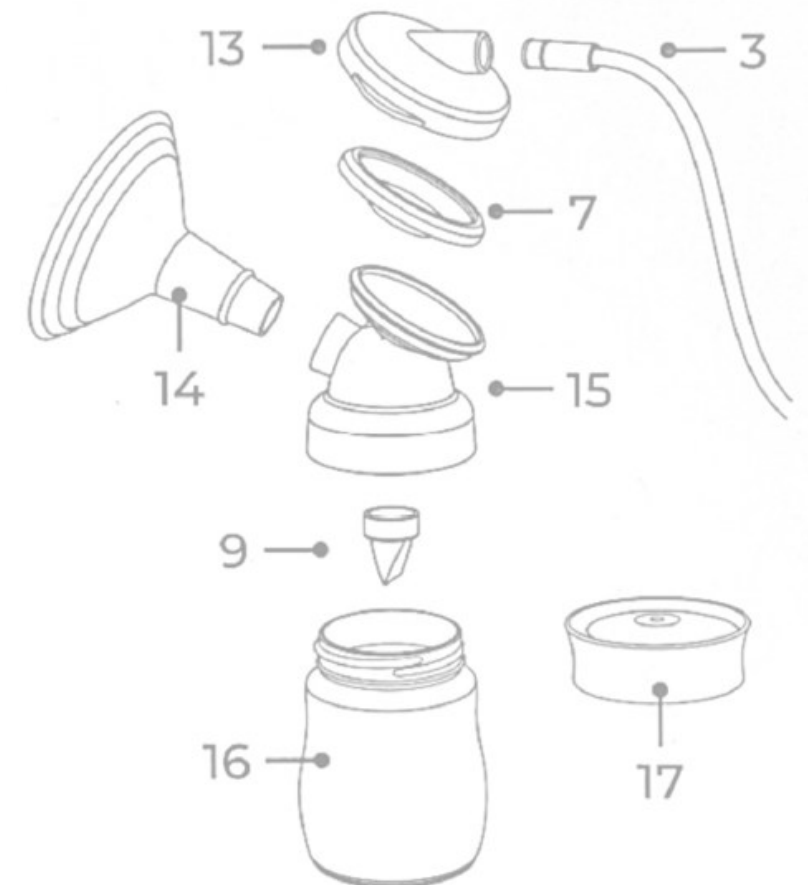

1. Bomba de extracción (motor)
2. Clip para enganche portable
3. Juego de tubos y conectores
4. Cable de carga USB
5. Inserto de brida de silicona 21mm
6. Brida para copa manos libres
7. Diafragma de silicona
8. Cuerpo de la brida manos libres
9. Válvula
10. Tapa de la copa de recolección
11. Copa de recolección
12. Correa de extensión para el sujetador
13. Tapa del diafragma
14. Brida SoftSeal
15. Cuerpo de la brida
16. Mamadera
17. Tapa de almacenamiento




Antes de comenzar, lave y seque sus manos, desmonte, limpie y desinfecte las piezas lavables del extractor. Cargue antes de su primera sesión de extracción. El extractor no se encenderá durante la carga.

Botones e íconos en pantalla



- 1. Estado de la batería en pantalla
- 2. Modo Extracción
- 3. Modo Estimulación
- 4. Indicador de velocidad (Alto/Bajo)
- 5. Temporizador (min)
- 6. Indicador del nivel de succión
- 7. Indicador de pausa
- 8. Botón de aumento de succión
- 9. Botón de disminución de succión
- 10. Botón de encendido/pausa
- 11. Botón de selección de modo/velocidad

	Indicación del ícono	Tiempo de carga restante
Rendimiento de la Batería	3 barras	Apróx. 250 minutos
	2 barras	Apróx. 160 minutos
	1 barra	Apróx. 80 minutos
	Menos de 1 barra	Apróx. 5 minutos

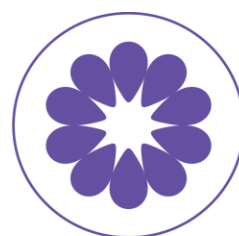

Lansinoh®

Servicio al Cliente
sac@besthouse.cl